



川村集团

KAWAMURAGROUP

公司与产品

川村 创意无限

 **KAWAMURA** Think Possibility

川村集团股份有限公司多年的经验累积和不断的精研技术，并与专家密切合制为您提供最合适的辅具，同时最大目的是抚平您的身体的缺憾。

产品目录2012-2013



久经考验的日本品质

步态解决方案 格通搜罗深 设计 R1

GAITSOLUTION Design R1



带减震器的踝足支架

Ankle Foot Orthosis with an Oil Damper

格通搜罗深系列

格通搜罗深系列-R1



特征



特征1

采用液压减震系统缓解行走困难

我们根据最新行走分析采纳了减震器。这种液压制动系统可根据个人最优足跖屈阻力进行设定。此外，牢固轻巧的钛架可支持小腿肌肉，通常可增加步行效率。



特征2

本产品可与许多鞋和矫形器兼容

考虑到客户都希望选择适合自己生活方式的鞋子，本器具适合与各种类型的鞋配合使用。我们进行了细致考虑，确保后跟高度合适，设计出脚踝装置的形状，并在踏板上装有胶垫，以最大程度地使客户满意。此外，本格通搜罗深系列的矫形器还采用后入式方法，使患者使用时无须抬脚。



特征3

外形美观，特别舒服

本下肢步态矫形器“格通搜罗深”有三种型号可供选择，以适合您的品味：标准型、都市型及运动型。每一种款式不仅设计巧妙、并且适合客户的服装。除极具吸引力外，本装置穿着舒服，因为接触皮肤的部分使用了水份分散垫。

颜色

● 标准型



● 都市型



● 运动型



规格

功能

- 制动范围
除背屈运动不受限制外，通过中间位置，最大可实现15度屈屈阻力。
- 制动力调节范围
阻力可从 2Nm 逐级调整到 20Nm
- 两个初始脚踝角位置
0或5度，可通过部件选择调节角度
- 产品重量
370公克

参考尺寸

- 小腿围：260mm - 400mm *1
- 脚长：230~260mm / *2
- *1 对于小腿和脚套，系带可剪短至想要的任意长度。(治疗学家或首席采购官应在医生指导下改变长度)
- *2 如果畸形过大或脚长大于上述尺寸，可使用定制的塑料或金属“格通搜罗深”


适应症

- 偏瘫、腓神经麻痹等
- 重量限制：70千克
90千克 (R1)

不适合使用的情况

- 严重痉挛状态或畸形
- 严重知觉障碍
- 膝过节过伸

* 治疗学家或首席采购官应在医生指导下选择矫形器
* 本产品是与国际医疗福祉大学的山本澄子教授共同开发的

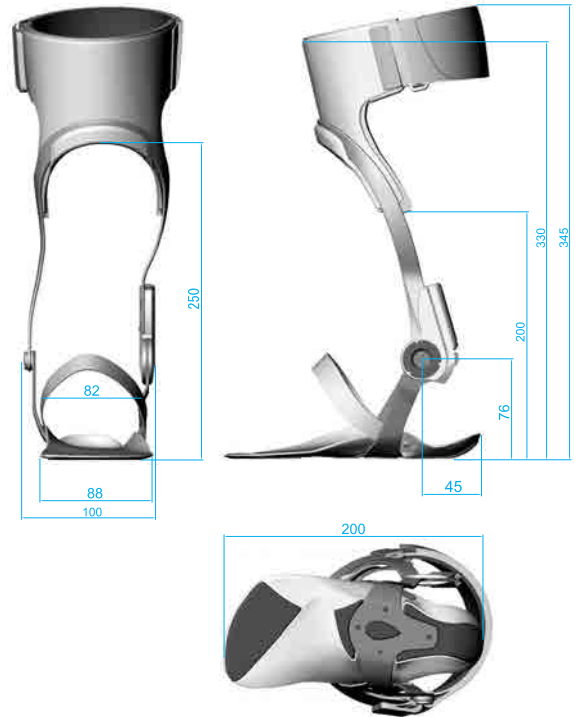

*上面的蓝色数字代表中码的规格。

共通材质
①

【格通搜罗深系列和格通搜罗深系列-R1】
腕部·脚底：PP (聚丙烯) 苯乙烯类弹性体
液压装置：铝 不锈钢 硅油
束带：尼龙

框架材质
②

【格通搜罗深系列】 钛
【格通搜罗深系列-R1】 不锈钢

适应患者

尺码	S	M	L
高度	145~155cm	155~170cm	170~180cm
脚长	21~23cm	23~26cm	26~28cm

更换备件



● 标准型

尺码		S		M		L	
左/右		L	R	L	R	L	R
下肢步态矫形器系列 “格通搜罗深”	已装配好	—	—	69500001	69500002	—	—
	装配工具包	—	—	69500101	69500102	—	—
下肢步态矫形器系列 “格通搜罗深” R1	已装配好	69500031	69500032	69500051	69500052	69500041	69500042
	装配工具包	69500501	69500502	69500053	69500054	69500507	69500508



● 都市型

尺码		S		M		L	
左/右		L	R	L	R	L	R
下肢步态矫形器系列 “格通搜罗深”	已装配好	—	—	69500003	69500004	—	—
	装配工具包	—	—	69500103	69500104	—	—
下肢步态矫形器系列 “格通搜罗深” R1	已装配好	69500033	69500034	69500037	69500038	69500043	69500044
	装配工具包	69500503	69500504	69500055	69500056	69500509	69500510



● 运动型

尺码		S		M		L	
左/右		L	R	L	R	L	R
下肢步态矫形器系列 “格通搜罗深”	已装配好	—	—	69500005	69500006	—	—
	装配工具包	—	—	69500105	69500106	—	—
下肢步态矫形器系列 “格通搜罗深” R1	已装配好	69500035	69500036	69500039	69500040	69500045	69500046
	装配工具包	69500505	69500506	69500057	69500058	69500511	69500512

治疗足下垂的ORTOP®(奥路通) AFO

踝足支架 长而坚硬

ORTOP[®]AFO
for Drop Foot **LH** Long & Hard





足下垂矫形器“奥路通®AFO”

已使用 20 多年的足下垂矫形器“奥路通®AFO”已进行了彻底的重新设计。

- 现在比以前更轻便、更舒服、使用更方便
- 除基本白色外，现在新加入了更多颜色，以适合个人品味
- 现在缩短了，大约接近掌指关节
- 短袜可方便地套在足下垂矫形器“奥路通AFO”上
- 弹性增强，因此更加舒服
- 由于其尺寸缩小，因此可进行更加多样化的鞋类选择
- 有备用脚踝和 Velcro（维可牢）® 脚踝绑带可供购买
- 脚踝绑带进行了重新设计，更符合脚部的自然形状。此外，由于紧紧贴住脚部，它也更加稳定
- 地板离矫形器中央高度的距离为 14.5 厘米（中码）



白色

适应症 ○ 中风后的足部内翻

○ 腓神经麻痹



黑色



浅蓝色



浅绿色

尺码	S		M		L		LL		
脚长	20.5~22cm		22.5~24cm		24.5~26cm		26.5~27.5cm		
左/右	L	R	L	R	L	R	L	R	
产品 编号	白色	69506001	69506002	69506003	69506004	69506005	69506006	69506007	69506008
	黑色	69506101	69506102	69506103	69506104	69506105	69506106	69506107	69506108
	浅蓝色	69506031	69506032	69506033	69506034	69506035	69506036	69506037	69506038
	浅绿色	69506061	69506062	69506063	69506064	69506065	69506066	69506067	69506068

更换备件

尺码	S		M		L		LL		
脚长	20.5~22cm		22.5~24cm		24.5~26cm		26.5~27.5cm		
左/右	L	R	L	R	L	R	L	R	
备件 编号	(环形套)	69506201	69506202	69506203	69506204	69506205	69506206	69506207	69506208
	(黑色环形套)	69506231	69506232	69506233	69506234	69506235	69506236	69506237	69506238



足下垂矫形器 “奥路通®AFO LH”

得到极大提升的破断拉力性能，可提升支撑度

- 足下垂矫形器“奥路通AFO LH”比足下垂矫形器“奥路通®AFO”的跖屈阻力更大
- 足下垂矫形器“奥路通AFO LH”比足下垂矫形器“奥路通®AFO”高3厘米
- 踏板延长至掌指关节的末端
- 有备用环形脚踝绑带和维可劳尼龙搭扣可供购买

适应症 ○ 中风后足部内翻
○ 腓神经麻痹



黑色



比足下垂矫形器
“奥路通AFO”高3厘米

白色

脚踏板延长到掌指关节的末端

【奥路通AFO&奥路通AFO LH的材质】

主体：PP (聚丙烯)

束带：尼龙

尺码	S		M		L		LL		
脚长	22~23.5cm		23.5~25.5cm		25.5~27.5cm		27.5~29cm		
左/右	L	R	L	R	L	R	L	R	
产品 编号	(白色)	69506111	69506112	69506113	69506114	69506115	69506116	69506117	69506118
	(黑色)	69506119	69506120	69506121	69506122	69506123	69506124	69506125	69506126

更换备件：环形套

尺码	S		M		L		LL		
左/右	L	R	L	R	L	R	L	R	
备品 编号	(白色)	69506241	69506242	69506243	69506244	69506245	69506246	69506247	69506248
	(黑色)	69506249	69506250	69506251	69506252	69506253	69506254	69506255	69506256

更换备件：粘扣带

备品 编号	(白色)	3540
	(黑色)	69060410

川村集团 日本

川村义肢株式会社

- 大阪 (总部)
- 东京
- 千叶
- 新宿
- 山梨
- 神奈川
- 滋贺
- 京都
- 奈良
- 兵庫
- 和歌山

我们直接向终端用户提供高品质的假肢矫形器和辅助器具。

帕西菲克莎普来株式会社

- 大阪 (总部)
- 札幌
- 仙台
- 东京
- 名古屋
- 广岛
- 福冈

我们以批发公司身份向全日本的经销商提供高品质的假肢矫形设备和辅助器具。



川村集团总部
日本大阪府大东市御领1-12-1
邮编：574-0064
电话：+81-72-875-8013
传真：+81-72-875-8017

我们寻求国际
业务合作伙伴!

请提供您的公司信息
与我们联系。

川村集团

帕西菲克莎普来株式会社

总部：日本大阪府大东市御领1-12-1
邮编：574-0064
电话：+81-72-875-8013 传真：+81-72-875-8017
Email info@p-supply.co.jp
Web <http://www.kawamura-gishi.com/en/company/products.html>

- 由于打印情况，图示的产品颜色可能与实际颜色略有不同
- 为改进产品，产品的规格和设计可能变更，恕不另行通知。